

2026 年度 Sysmex Hemostasis サーベイご案内



Hemostasis サーベイ ご案内

拝啓 時下、ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして、格別のお引立てを賜り誠にありがとうございます。

本サーベイは2017年より“線溶系サーベイ”としてFDP・Dダイマーの全国サーベイを実施、2020年から新たに“Hemostasis サーベイ”として運用と名称を変更し実施してまいりました。今年度も貴施設の精度管理支援・測定精度向上ならびに弊社の市販後調査の一環として、実施いたします。

また、これまでご協力いただいておりますアンケートサーベイにつきましては、日常業務における課題やお困りごとの把握とその解決に寄与する取り組みとして、多くの医療機関の皆様より高いご評価をいただいております。本サーベイへのご参加により、自施設の測定状況の客観的な把握や他施設との比較を通じた新たな気づきを得ていただくとともに、日常業務のさらなる質向上にお役立ていただけますと幸いです。

本年度の実施内容およびスケジュールにつきましては、次頁よりご案内しておりますので、ぜひご確認ください。皆様のご理解とご賛同のもと、多くのご参加を心よりお待ちしております。

敬具

2026年7月 Sysmex Hemostasis サーベイ事務局

これまで継続してご参加いただいている医療機関の皆様へ

継続してご参加いただき、誠にありがとうございます。

今年度より、運用方法に一部変更がございますのでご案内申し上げます。これまで「参加登録・結果登録・アンケートサーベイ回答」を同一時期に実施しておりましたが、今年度より「**参加登録およびアンケートサーベイ登録期間**」と「**結果登録期間**」を分けて運用いたします。これに伴い、個別成績表のダウンロード時期につきましても、例年より約1か月後の公開となっています。詳細なスケジュールおよび概要につきましては、P.4に掲載しておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。今後も、より良いサーベイ環境の構築を目指し、運営に努めてまいります。引き続きよろしくお願いいたします。

目次

ご案内対象.....	3
概要とスケジュール.....	4
準備するもの.....	5
参加登録・アンケートサーベイの回答を登録する	6
試料を測定する（FDP/D ダイマー）	9
試料を測定する（FMC）	10
試料を測定する（LA（dRVVT））	11
試料を測定する（因子活性）	12
測定結果を登録する.....	13
個別成績表をダウンロードする.....	18
Q&A	21

ご案内対象

弊社凝固装置で、以下弊社製品のいずれかの試薬で測定頂いているご施設

・ リアスオート™ P-FDP	製造販売認証番号：226ABAMX00014000
・ リアスオート™・Dダイマーネオ	製造販売承認番号：21600AMZ00654000
・ オートLIA® FM	製造販売承認番号：21400AMZ00539000 製造販売元：島津ダイアグノスティクス株式会社
・ LA試薬DRVVT	製造販売認証番号：304ABEZ00006000
・ レボヘム™ 第II因子定量キット	製造販売届出番号：28E1X80030000071
・ レボヘム™ 第V因子定量キット	製造販売認証番号：306AAEZ00040000
・ レボヘム™ 第VII因子定量キット	製造販売届出番号：28E1X80030000072
・ レボヘム™ 第VIII因子定量キット	製造販売届出番号：28E1X80030000070
・ レボヘム™ 第IX因子定量キット	製造販売届出番号：28E1X80030000069
・ レボヘム™ 第X因子定量キット	製造販売届出番号：28E1X80030000073
・ レボヘム™ 第XI因子定量キット	製造販売認証番号：306AAEZ00041000
・ レボヘム™ 第XII因子定量キット	製造販売認証番号：306AAEZ00042000
・ トロンボチェック血液凝固第II因子定量キット	製造販売届出番号：28E1X80030000062
・ トロンボチェック血液凝固第V因子定量キット	製造販売認証番号：229ABEZ00010000
・ トロンボチェック血液凝固第VII因子定量キット	製造販売届出番号：28E1X80030000063
・ トロンボチェック血液凝固第VIII因子定量キット	製造販売届出番号：28E1X80030000067
・ トロンボチェック血液凝固第IX因子定量キット	製造販売届出番号：28E1X80030000068
・ トロンボチェック血液凝固第X因子定量キット	製造販売届出番号：28E1X80030000064
・ トロンボチェック血液凝固第XI因子定量キット	製造販売認証番号：301ABEZ00006000
・ トロンボチェック血液凝固第XII因子定量キット	製造販売認証番号：301ABEZ00010000
・ 第II・V・VII・VIII・IX・X・XI・XII因子欠乏血漿	
・ ベリクローム F XIII	製造販売承認番号：21700AMY00004000
・ レボヘム™ FVIII 合成基質	製造販売届出番号：28E1X80030000060
・ レボヘム™ FIX 合成基質	製造販売承認番号：23000EZ00032000

概要とスケジュール

評価項目

FDP・DD・FMC：Low/Highの2濃度を評価（全体評価のほか、測定機器別の集計・評価も行います）

LA（dRVVT）：Low/Middle/Highの3濃度を評価（全体評価のみ）

因子活性：Low/Highの2濃度を集計（※評価は行いません）

アンケートサーベイ

クロスミキシングテストの運用調査を行います。集計結果は、最終報告（冊子）にて報告させていただきます。
ご協力賜りますようお願い申し上げます。

測定試料

弊社担当者よりお受け取りください。お受け取り時には受領書へのサインをよろしくお願いいたします。

測定試料は**保冷品**となります。溶解方法は、P.9～12をご確認ください。

スケジュール

参加登録およびアンケートサーベイご回答の登録：8/3（月）～8/28（金）



測定結果の登録：9/14（月）～10/16（金）※締切厳守



サーベイ集計結果（個別成績表） 一次報告ダウンロード：11/24（火）～



サーベイ集計結果（全体集計結果のご報告） 最終報告：12月～（予定）

昨年ご参加いただいた医療機関の皆様へ

昨年より運用方法を変更し、「参加登録・アンケートサーベイ回答期間」と「測定結果登録期間」の2つに分けております。お手数をおかけいたしますが、お間違いのないようご確認のうえ、ご対応いただきますようお願い申し上げます。

準備するもの

□ 測定試料

参加する項目に該当する測定試料を弊社営業担当よりお受け取りください。

- FDP/D ダイマー測定試料
- FMC 測定試料
- LA 測定試料
- 因子活性測定試料

□ Hemostasis サーベイ開催と ID/パスワードのご案内

(例)

2025年7月吉日

御中

シスメックス株式会社

Sysmex Hemostasisサーベイ User ID・パスワードのご案内

拝啓 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。今年度もSysmex Hemostasisサーベ
イを開催いたします。
本サーベイでは結果登録サイトおよび成績表ダウンロードサイトにて、User IDおよびパスワ
ードを使用いたします。貴施設の情報をご案内しておりますので、大切に保管ください。
重ねて、測定試料を受け取られましたら下記の受領書のサインをお願い申し上げます。
ご参加の方法及び結果登録方法は別冊のご案内資料をご確認いただくか、弊社サポートインフォ
メーションサイト特設サイトをご確認ください。貴施設のご賛同とご参加をお待ちしております。

敬具

結果登録サイト・成績表ダウンロードサイト：User IDおよびパスワード

サイトリンク

User ID: ●●●●●●
パスワード: ●●●●●●

Sysmex Hemostasisサーベイ用試料受領書

Sysmex Hemostasisサーベイ事務局
且付: 年 月 日
担当者: 氏

ご施設名: _____
所在地: _____

以下の物品について、確かに受領しました。(□にチェックをしてください)

☐ Sysmex Hemostasisサーベイ	FDP/DD用試料	1箱
☐ Sysmex Hemostasisサーベイ	FMC用試料	1箱
☐ Sysmex Hemostasisサーベイ	LA (dRVVT) 用試料	1箱
☐ Sysmex Hemostasisサーベイ	因子活性用試料	1箱

受領日: 年 月 日
受領者: 氏 印

- 参加・結果登録に必要なID/パスワードが記載されて
います。弊社営業担当より**必ずお受け取りください。**
- お持ちでない方は、最寄りの弊社営業担当までお問合せ
ください。
- 下段、測定試料の受領書のご記入にご協力ください。

ID/パスワード メモ

- ID/パスワードを忘れないよう以下にメモください。

User ID : _____

パスワード : _____

□ 本案内冊子

①参加登録・アンケートサーベイの回答を登録する(8/3(月)～8/28(金))

参加・結果登録の前に、弊社営業担当より
ID/パスワードのご案内をお受け取りください

- ① 弊社サポートインフォメーションサイトへアクセスしてください。
 - サポートインフォメーションURL：<https://sysmex-support.com/jp/>
 - 検索サイト等で“シスメックス サポートインフォメーション”と検索ください。
- ② サポートインフォメーションメインページから“学習/セミナー”▶“Hemostasis サーベイ”をクリック。



- ③ サーベイ専用サイト“参加・アンケートサーベイ登録”をクリック。
※ 登録には別紙ご案内に記載されたパスワードが必要となります。

①参加登録・アンケートサーベイの回答を登録する(8/3(月)～8/28(金))

④ パスワードを入力してください。

ID/パスワードのご案内に記載されたパスワード(Sys“英数字6桁”)を入力してください。

※ 英数字6桁だけではなく、必ず“Sys”から入力してください。

Sysmex Hemostasisサーベイ

参加を希望される方は、別紙に記載されたパスワード“Sys(英数字6桁)”を入力し、「送信」ボタンを押してください。
※別紙をお持ちでない方は最寄りの弊社営業所までお問合せください。
※参加を希望されない方は、お手数ですがサポートインフォメーションへお戻りください。

パスワード“Sys(英数字6桁)”

送信

2025年7月吉日

御中

シスメックス株式会社

Sysmex Hemostasisサーベイ User ID・パスワードのご案内

拝啓 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。今年度もSysmex Hemostasisサーベ
イを開催いたします。
本サーベイでは結果登録サイトおよび成績表ダウンロードサイトにて、User IDおよびパスワ
ードを使用いたします。貴施設の情報をご案内しておりますので、大切に保管ください。
重ねて、測定材料を受け取られましたら下記受領書のサインをお願い申し上げます。
ご参加の方法及び結果登録方法は別冊のご案内資料をご確認いただくか、弊社サポートインフォ
メーションサイト特設サイトをご確認ください。貴施設のご賛同とご参加をお待ちしております。
敬具

結果登録サイト・成績表ダウンロードサイト: User IDおよびパスワード

パスワード: ●●●●●●

Sysmex Hemostasisサーベイ用決料受領書

Sysmex Hemostasisサーベイ事務局

⑤ 都道府県、病院名を確認してください。メール配信ご希望の方はメールアドレスを入力してください。

成績表ダウンロード開始日にメールを配信いたします。※それ以外の利用はございません。

Sysmex Hemostasisサーベイ

以下のフォームに必要な項目を入力の上、送信をクリックしてください。

都道府県 必須

兵庫県

病院名 必須

シスメックス病院

メールアドレス (PC)

※成績表の通知を行います。メール配信をご希望の方はご記入ください。

⑥ 参加予定の装置をプルダウンから選び、ニックネームを記入ください。

特に、2台以上登録する方は区別がつくよう装置ニックネームを入力してください。(例: 1号機、メイン)

下段に2・3台目を登録することができますので、同じ動作を繰り返してください。

4台以上登録したい方はお手数ですが弊社営業までご相談ください。

①参加登録・アンケートサーベイの回答を登録する(8/3(月)～8/28(金))

⑦ 報告する項目にチェックを入れ、現在ご使用の試薬のロット番号を入力してください。

報告項目を選択ください。選択した項目の右側に、測定で使用した試薬ロットNo(英数字)をご記入ください。 **必須**

☐ FDP

☐ DD

☐ FMC

☐ LA(dRVVT)


★試薬 Lot の確認方法

試薬バイアルや箱に記載されている英数字をご確認ください。

FDP/D ダイマーの場合：(例) ZS00AB、ZS0012

FMCの場合：(例) 001、020、095

LAの場合：(例) 01201

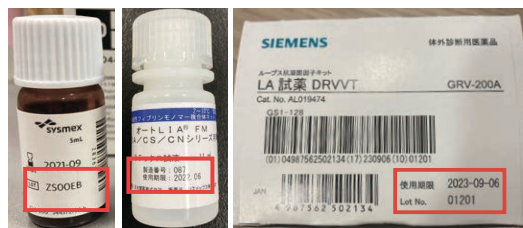

⑧ 外因系因子/内因系因子の集計にご参加される方は測定に使用する試薬を順にご記入ください。

※ プルダウンから該当する試薬がなかった場合はコメント欄にご記載ください。

※ 因子の集計にご参加されない方はそのままアンケートへお進みください。

⑨ アンケートを回答する。(所要時間約5～10分)

本市販後調査の一環として実施するアンケートサーベイでは、製品の使用状況ならびにクロスミキシングの運用状況につきまして、ご回答をお願い申し上げます。

ご回答内容の一部は集計のうえ総評としてご報告し、今後のサービス改善や情報提供に活用させていただきます。

なお、ご回答内容は弊社資料に使用する場合がありますが、個別施設が特定されることはございません。

内容にご同意いただける場合はご回答ください。

ご同意いただけない場合は“回答不可”をご選択ください。

⑩ 送信ボタンをクリック。

結果登録期間中は何度でもログインし、結果の入力・修正・確認していただくことが可能です。

送信

②試料を測定する（FDP/D ダイマー）

FDP・D ダイマー試料

開栓前は2～8℃で保存ください。

測定試料の溶解方法

常温に戻したのち、精製水1mlを加えて穏やかに転倒混和。完全に溶解し20分間常温で静置後、使用します。
溶解後有効期間は2～8℃保存で**1週間**です。**凍結保存はできません。**

測定方法

通常の検体と同様に測定ください。（微量モード）

測定結果 メモ

測定した結果のメモとして活用ください。

●試薬ロット

FDP : ZS00

D ダイマー : ZS00

試薬ロットは試薬ビンに記載されているZS00から始まる英数字をご記入ください。



2台以上登録の方は区別がつくよう、ニックネームをつけてください。
（例：1号機）

●測定結果

装置名 : _____ 装置ニックネーム : _____

	FDP	DD
Low (μg/ml)		
High (μg/ml)		

装置名 : _____ 装置ニックネーム : _____

	FDP	DD
Low (μg/ml)		
High (μg/ml)		

装置名 : _____ 装置ニックネーム : _____

	FDP	DD
Low (μg/ml)		
High (μg/ml)		

②試料を測定する (FMC)

FMC 試料

開栓前は2～10℃で保存ください。

測定試料の溶解方法

精製水1mlを加えて転倒混和した後、20分間常温で静置します。再度緩やかに転倒混和し使用します。

溶解後有効期間は**2～8℃保存：8時間、－40℃：1か月。**

※－40℃（凍結）保存する場合には、1回のみ凍結融解が可能です。

測定方法

通常の検体と同様に測定ください。（微量モード）


測定結果 メモ

測定した結果のメモとして活用ください。

●試薬ロット

FMC：_____

試薬ロットは試薬ビンに記載されている数字をご記入ください。

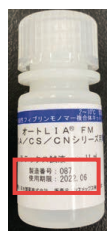

2台以上登録の方は区別がつくよう、ニックネームをつけてください。
(例：1号機)

●測定結果

装置名：_____

装置ニックネーム：_____

Level	FMC 測定値
Low (µg/ml)	
High (µg/ml)	

装置名：_____

装置ニックネーム：_____

Level	FMC 測定値
Low (µg/ml)	
High (µg/ml)	

装置名：_____

装置ニックネーム：_____

Level	FMC 測定値
Low (µg/ml)	
High (µg/ml)	

②試料を測定する (LA (dRVVT))

LA 試料

開栓前は2～10℃で保存ください。

測定試料の溶解方法

精製水1mlを加えて転倒混和した後、15分間室温で静置します。再度緩やかに転倒混和し使用します。

溶解後有効期間は**2～8℃保存：4時間、－20℃：1週間。**

※－20℃（凍結）保存する場合には、1回のみ凍結融解が可能です。

測定方法

通常の検体と同様に測定ください。（微量モード）

測定結果 メモ

測定した結果のメモとして活用ください。

●試薬ロット

LA 試薬 DRVVT：_____

試薬ロットは試薬箱に記載されている数字をご記入ください。



2台登録の方は区別がつくよう、ニックネームをつけてください。
(例：1号機)

●測定結果

装置名：_____ 装置ニックネーム：_____

項目	LA1 (sec)	LA2 (sec)	LA R
LA (dRVVT) Low			
LA (dRVVT) Middle			
LA (dRVVT) High			

装置名：_____ 装置ニックネーム：_____

項目	LA1 (sec)	LA2 (sec)	LA R
LA (dRVVT) Low			
LA (dRVVT) Middle			
LA (dRVVT) High			

装置名：_____ 装置ニックネーム：_____

項目	LA1 (sec)	LA2 (sec)	LA R
LA (dRVVT) Low			
LA (dRVVT) Middle			
LA (dRVVT) High			

②試料を測定する（因子活性）

因子活性試料

開栓前は2～10℃で保存ください。

測定試料の溶解方法

精製水1mlを加えて転倒混和した後、15分間室温で静置します。再度緩やかに転倒混和し使用します。

溶解後有効期間は**15～25℃保存：4時間、－20℃：4週間。**

※ 溶解後、2～8℃で保存しないでください。

※ －20℃（凍結）保存する場合には、1回のみ凍結融解が可能です。融解は37℃10分以内に完了させ、2時間以内に測定を実施ください。

測定方法

通常の検体と同様に測定ください。（微量モード）

測定結果 メモ

測定した結果のメモとして活用ください。

●測定結果

装置名：_____ 装置ニックネーム：_____

●外因系使用試薬

PT 試薬：_____

II/V/VII/X 因子試薬：_____

標準品：_____

	測定値
第II因子 Low (%)	
第II因子 High (%)	
第V因子 Low (%)	
第V因子 High (%)	
第VII因子 Low (%)	
第VII因子 High (%)	
第X因子 Low (%)	
第X因子 High (%)	

●内因系使用試薬

APTT 試薬：_____

VIII/IX/XI/XII 因子試薬：_____

標準品：_____

	測定値
第VIII因子 Low (%)	
第VIII因子 High (%)	
第IX因子 Low (%)	
第IX因子 High (%)	
第XI因子 Low (%)	
第XI因子 High (%)	
第XII因子 Low (%)	
第XII因子 High (%)	

●XIII 因子使用試薬

XIII 因子試薬：_____

標準品：_____

	測定値
第XIII因子 Low (%)	
第XIII因子 High (%)	

③測定結果を登録する(9/14(月)～10/16(金))

測定結果登録の前に、ID/パスワードをご確認ください

- ① 弊社サポートインフォメーションサイトへアクセスください。
 - サポートインフォメーションURL：<https://sysmex-support.com/jp/>
 - 検索サイト等で“シスメックス サポートインフォメーション”と検索ください。
- ② サポートインフォメーションメインページから“学習/セミナー”▶“Hemostasis サーベイ”をクリック。



- ③ サーベイ専用サイト“測定結果の登録・個別成績表ダウンロード”をクリック。
 - ※ 測定結果の登録には別紙ご案内に記載されたID/パスワードが必要となります。

③測定結果を登録する(9/14(月)～10/16(金))

④ User ID・パスワードを入力してログインしてください。

※ 測定結果登録には別紙ご案内に記載されたID/パスワードが必要となります。

注意：User ID/パスワードを忘れてしまった場合は弊社営業担当までお問合せください。

The image shows the Smart EQAS login interface and a separate document titled "Sysmex Hemostasis Survey User ID・パスワードのご案内". The login screen has fields for "ユーザ ID" (User ID) and "パスワード" (Password), with arrows pointing to the corresponding fields in the guide. The guide includes a QR code and a box for entering the User ID and Password, with a red box highlighting the "詳細" (Details) button.

⑤ "EQA一覧"をクリック。

The image shows the home screen of the system. The "EQA一覧" button is highlighted with a red box and a hand cursor, indicating it should be clicked.

⑥ "詳細"をクリック。

※ "データ登録状態"が"実施中"となっている"2026年度 Hemostasis Survey"の"詳細"をクリックしてください。

The image shows the "EQA一覧" (EQA List) screen. It displays a table of surveys with columns for "年度" (Year), "回数" (Number of times), "分野" (Field), "EQA名" (EQA Name), and "データ登録状態" (Data Registration Status). The "2026年度 Hemostasis Survey" is highlighted with a red box, and the "詳細" (Details) button is indicated by a hand cursor.

年度	回数	分野	EQA名	データ登録状態	
2026	2	03・COAGULATION	2026年度 Hemostasis Survey (FDP/DD/FMC 機器別評価)	実施中	詳細
2026	1	03・COAGULATION	2026年度 Hemostasis Survey (FDP/DD/FMC/LA/因子 全体評価)	実施中	詳細
2024	2	03・COAGULATION	2024年度 Hemostasis Survey (FDP/DD/FMC 機器別評価)	完了	詳細

③測定結果を登録する(9/14(月)～10/16(金))

- ⑦ 下へスクロールし、参加登録時に登録した“機種名”と“ニックネーム”をご確認ください。(緑枠)
参加する装置の“コード設定”をクリックしてください。(赤枠)

(例) ホーム > EQA一覧 > EQA情報詳細

EQA情報詳細

主番名	Sysmex Hemostasis Survey	分野	03・COAGULATION
年度	2025	回数	1
EQA名	2025年度 Hemostasis Survey (FDP/DD/FM)		
サンプルA	25Hemostasis-Low	サンプルB	25Hemostasis-High
サンプルC	25LA-Low	サンプルD	25LA-Middle
サンプルE	25LA-High	サンプルF	25Factor-Low
サンプルG	25Factor-High		
状態	実施中	測定回数	1
EQA開始日	2026/07/02	EQA終了日	2026/07/31
ダウンロード開始日	2026/09/01	ダウンロード終了日	2026/09/30

装置一覧

メーカー名	機種名	ニックネーム	登録状態			
Sysmex	CA-500/600シリーズ	2号	登録確定	詳細	測定値登録	コード設定
Sysmex	CN-6000/CN-3000/CN-6	1号	登録確定	詳細	測定値登録	コード設定
Sysmex	CN-6000/CN-3000/CN-6	3号	登録確定	詳細	測定値登録	コード設定

- ⑧ 記載された分類名(試薬ロット)、試薬名をご確認ください。
分類名(試薬ロット)に変更がある場合はプルダウンから選択ください。
ご確認後、“更新”をクリックしてください。
※ 該当する試薬ロットNo.がない場合は“その他”をご記入ください。
※ 参加する装置ごとに、⑦および⑧の作業をお願いいたします。

(例) ホーム > EQA一覧 > EQA情報詳細 > コード設定登録

コード設定登録

メーカー名	Sysmex	機種名	CA-500/600シリーズ
分野	03・COAGULATION	ニックネーム	2号

コード設定一覧

項目名	分類名	試薬名
P-FDP	-	-
D-D	-	-
FMC	-	-
LA1	-	-
LA2	-	-
LA R	-	-
II (%)	-	-
V (%)	-	-
VII (%)	-	-
VIII (%)	-	-
IX (%)	-	-
X (%)	-	-
XI (%)	-	-
XII (%)	-	-

検索結果: 6 件

更新

③測定結果を登録する(9/14(月)～10/16(金))

⑨ 測定値を入力する装置の“測定値登録”をクリックしてください。

(例) ホーム > EQA一覧 > EQA情報詳細

EQA情報詳細

主査者名	Sysmex Hemostasis Survey	分野	03・COAGULATION
年度	2025	回数	1
EQA名	2025年度 Hemostasis Survey (FDP/DD/FH)		
サンプルA	25Hemostasis-Low	サンプルB	25Hemostasis-High
サンプルC	25LA-Low	サンプルD	25LA-Middle
サンプルE	25LA-High	サンプルF	25Factor-Low
サンプルG	25Factor-High		
状態	実施中	測定回数	1
EQA開始日	2026/07/02	EQA終了日	2026/07/31
ダウンロード開始日	2026/09/01	ダウンロード終了日	2026/09/30

装置一覧

メーカー名	機種名	ニックネーム	登録状態	詳細	測定値登録	コード設定
Sysmex	CA-500/600シリーズ	2号	登録確定	詳細	測定値登録	コード設定
Sysmex	CN-6000/CN-3000/CN-6	1号	登録確定	詳細	測定値登録	コード設定
Sysmex	CN-6000/CN-3000/CN-6	3号	登録確定	詳細	測定値登録	コード設定

⑩ 参加する項目の測定値を“1回目”にご記入ください。

※ ご記入箇所にお間違えのないようお気をつけください。

※ “コメント登録”にはコメントを登録することができますが、成績表へは反映されません。ご施設内でのメモとしてご活用ください。

(例) ホーム > EQA一覧 > EQA情報詳細 > 測定値登録

測定値登録

メーカー名	Sysmex	機種名	CA-500/600シリーズ
分野	03・COAGULATION	ニックネーム	2号
サンプル			

日付設定

測定値一覧

サンプル	項目名	1回目	コメント登録
25Hemostasis-Low	P-FDP (μg/mL)		コメント登録
25Hemostasis-Low	D-D (μg/mL)		コメント登録
25Hemostasis-Low	FMC (μg/mL)		コメント登録
25Hemostasis-High	P-FDP (μg/mL)		コメント登録
25Hemostasis-High	D-D (μg/mL)		コメント登録
25Hemostasis-High	FMC (μg/mL)		コメント登録
25LA-Low	LA1 (秒)		コメント登録
25LA-Low	LA2 (秒)		コメント登録
25LA-Low	LA R (RATIO)		コメント登録
25LA-Middle	LA1 (秒)		コメント登録
25LA-Middle	LA2 (秒)		コメント登録
25LA-Middle	LA R (RATIO)		コメント登録
25LA-High	LA1 (秒)		コメント登録

検索結果: 15 件

測定値のご入力完了後、今後変更がない場合は“登録”をクリックしてください。

登録期間内に変更の可能性がある場合は“一時保存”を選択いただきますようお願いいたします。

※ “登録”後はデータの修正ができませんので、あらかじめご了承ください。

※ “一時保存”のままではデータは登録されず、成績表が作成されません。入力値を確認後、必ず“登録”をお願いいたします。

一時保存

登録

③測定結果を登録する(9/14(月)～10/16(金))

⑪ 登録後、以下画面にて参加装置の“登録状態”欄が、“登録確定”になっていることを確認してください。

※ “登録確定”となっていない場合は、⑧で“登録”ができていません。必要な情報がすべて入力されていることを確認して“登録”をクリックしてください。

※ 登録後、データの編集はできませんので、お気を付けください。

(例)

ホーム > EQA一覧 > EQA情報詳細

EQA情報詳細

主催者名	Sysmex Hemostasis Survey	分野	03・COAGULATION
年度	2025	回数	1
EQA名	2025年度 Hemostasis Survey (FDP/DD/FM)		
サンプルA	25Hemostasis-Low	サンプルB	25Hemostasis-High
サンプルC	25LA-Low	サンプルD	25LA-Middle
サンプルE	25LA-High	サンプルF	25Factor-Low
サンプルG	25Factor-High		
状態	実施中	測定回数	1
EQA開始日	2026/07/02	EQA終了日	2026/07/31
ダウンロード開始日	2026/09/01	ダウンロード終了日	2026/09/30

装置一覧

メーカー名	機種名	ニックネーム	登録状態			
Sysmex	CA-500/600シリーズ	2号	登録確定	詳細	測定値登録	コード設定
Sysmex	CN-6000/CN-3000/CN-6	1号	登録確定	詳細	測定値登録	コード設定
Sysmex	CN-6000/CN-3000/CN-6	3号	登録確定	詳細	測定値登録	コード設定

④個別成績表をダウンロードする(11/24(火)～)

個別成績表ダウンロードの前に、ID/パスワードをご確認ください

- ① 弊社サポートインフォメーションサイトへアクセスしてください。
 - サポートインフォメーションURL：<https://sysmex-support.com/jp/>
 - 検索サイト等で“シスメックス サポートインフォメーション”と検索ください。
- ② サポートインフォメーションメインページから“学習/セミナー”▶“Hemostasis サーベイ”をクリック。



- ③ サーベイ専用サイト“測定結果の登録&個別成績表ダウンロード”をクリック。
 - ※ 成績表ダウンロードには別紙ご案内に記載されたID/パスワードが必要となります。
 - ※ 2026年11月24日(火)以降の公開を予定しています。

④個別成績表をダウンロードする(11/24(火)～)

④ User ID・パスワードを入力してログインしてください。

※ 成績表ダウンロードには別紙ご案内に記載されたID/パスワードが必要となります。

注意：User ID/パスワードを忘れてしまった場合は弊社営業担当までお問合せください。

The image shows the Smart EQAS login interface on the left and a separate document on the right. The document is dated 2025年7月吉日 and is from シスメックス株式会社. It contains a QR code and a box with User ID and Password, both represented by dots. Blue arrows point from the document's User ID and Password fields to the corresponding input fields on the Smart EQAS login screen.

⑤ “EQA一覧”をクリック。

The image shows the home screen of the Smart EQAS system. At the top, there are fields for 施設名 (Test User1) and ユーザ名 (Test User1), along with a ログアウト button. Below these, there are three large buttons: 'EQA一覧' (highlighted with a red box and a hand cursor), 'パスワード変更', and a question mark icon.

⑥ “詳細”をクリック。

The image shows the 'EQA一覧' (EQA List) screen. At the top, there are fields for 施設名 (Test User1) and ユーザ名 (Test User1), along with a ログアウト button. Below these, there is a breadcrumb trail: ホーム > EQA一覧. The main content area shows a dropdown menu for 主催者名 (Sysmex Hemostasis Survey). Below this is a table with the following data:

年度	回数	分野	EQA名	データ登録状態
2025	2	03・COAGULATION	2025年度 Hemostasis Survey (FDP/DD/FMC 機器別評価)	実施中
2025	1	03・COAGULATION	2025年度 Hemostasis Survey (FDP/DD/FMC/LA/因子 全体評価)	実施中

At the bottom right of the table, there are two '詳細' (Details) buttons, one for each row, both highlighted with a red box and a hand cursor.

※ 参加いただいた項目や機器によって、該当する項目のみ最大2種類が表記されます。

- ・ FDP/DD/FMC/LA/ 因子 全体評価 … 参加いただいた施設すべてを母集団とした結果
- ・ FDP/D ダイマー /FMC 機器別評価 … 同じ機器で測定したデータを母集団(※ N=5 以上)とした結果

④個別成績表をダウンロードする(11/24(火)～)

⑦ 下へスクロールし、“**レポートダウンロード**”をクリック。

※ PDFで出力されますので、ご自身のPCに保存ください。

※ 2台以上登録されている場合、1回のダウンロードボタンクリックで全ての装置の成績表がzipファイルで抽出できます。

(例)施設名Test User1ユーザ名Test User1ログアウト

ホーム > EQA一覧 > EQA情報詳細

EQA情報詳細

主催者名

Sysmex Hemostasis Survey

年度

2025

EQA名

2025年度 Hemostasis Survey (FDP/DD/FV)

サンプルA

25Hemostasis-Low

サンプルC

25LA-Low

サンプルE

25LA-High

サンプルG

25Factor-High

状態

実施中

EQA開始日

ダウンロード開始日

2025/10/06

分野

03・COAGULATION

回数

1

サンプルB

25Hemostasis-High

サンプルD

25LA-Middle

サンプルF

25Factor-Low

測定回数

1

EQA終了日

ダウンロード終了日

装置一覧

メーカー名	機種名	ニックネーム	登録状態			
Sysmex	CN-3000/6000	sysmex-CN	未登録	詳細	測定値登録	コード設定

レポートダウンロード

全体集計結果 報告冊子(12月予定)

弊社担当より、直接ご提供いたします。

※ 時期は前後する可能性があります。

Q&A

測定試料について

Q：FMC 試料・LA 試料・因子活性を凍結保存しました。融解方法を教えてください。

A：保冷庫から取り出して容器が破損していないことを確認のち、パラフィルムなどをしっかり巻き37℃の恒温槽にて急速融解(3分程度)します。その後、室温に10分間程静置して、緩やかに攪拌、泡が無いことを確認してから測定をしてください。

参加登録&アンケートサーベイ入力について

Q：入力期日を過ぎてしまいましたが、参加を希望します。

A：恐れ入りますが、担当営業までご相談ください。

Q：送信後に入力内容を確認することはできますか？

A：はい、可能です。再度ログインいただくことで、ご入力内容をご確認いただけます。

Q：サーベイの結果報告で使用する予定のロットではなく、現在使用中のロット番号を記入すればよいのでしょうか？

A：可能であれば、サーベイ結果報告に使用予定のロット番号をご記入ください。ご不明な場合は、現在ご使用中のロット番号をご記入いただいて問題ございません。

測定結果入力について

Q：誤って"登録"を押してしまい、測定結果の入力ができなくなりました。

A：恐れ入りますが、担当営業までご相談ください。



2026年度 Sysmex Hemostasis サーベイご案内

発行元

シスメックス株式会社 日本・東アジアマーケティング部

Sysmex Hemostasisサーベイ事務局

東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー8F 〒141-0032

お問い合わせ先: 03-5434-8910 (日本・東アジアマーケティング部)

www.sysmex.co.jp



製造販売元

シスメックス株式会社



注 : 活動及びサイトの適用範囲は規格により異なります。
詳細は www.tuv.com の ID 0910589004 を参照。

Note : Scopes of sites and activities vary depending on the standard.
For details, refer to the ID 0910589004 at www.tuv.com

2606DY