


Q16. 血液装置のデータ送るための QC Register とは何ですか？

A16. シスメックスの血液装置（XE シリーズ、XT シリーズ、XS シリーズ）から出力されるコントロール血球の QC ファイル（日内データ）を USB、SD カード等外部記憶媒体に保存し、専用サイトから SNCS/eQAPi システムにデータを送信することができる Web ツールです。※外部記憶媒体はご施設にてあらかじめ準備をお願いします。

また、Web ツールの血液装置専用メニューから送信したデータを基に、QC-Report の Xbar-Rs-R 管理図を作成することができます。

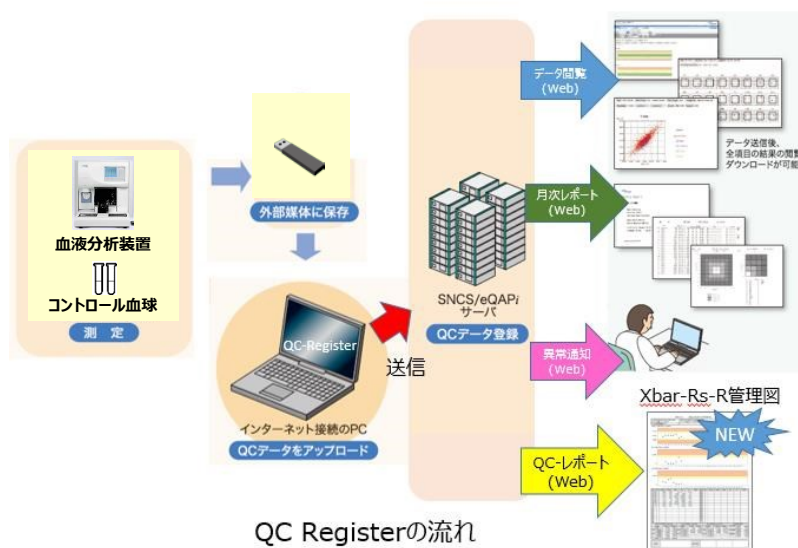

操作方法は、https://sysmex-support.com/jp/menu/snsc_eqapi_about/uploads/QC_Register_Hema_Manual.pdf

を参照してください。ご不明な場合は、カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

【動作環境】

対応 OS : Windows7 SP1、Windows 8、Windows 10

対応ブラウザ : Internet Explorer 11、Edge、Google Chrome